

Digital

Next™ Essential Serie BTE



4 canales, 8 bandas, direccionalidad

CARACTERÍSTICAS DEL AUDÍFONO

- 2 programas de ajuste manual que permiten adaptar el audífono a las necesidades y preferencias del usuario.
- Avanzada gestión de la retroalimentación ("feedback") que ofrece un nivel de ganancia más útil, lo cual permite a los clientes disfrutar del confort y las ventajas de un modelo de ajuste abierto.
- La función AntiShock™ reduce instantáneamente el nivel de ruidos impulsivos como portazos, manteniendo al mismo tiempo la calidad y percepción del habla.
- 4 canales y 8 bandas permiten una modulación flexible y precisa de la frecuencia.
- El sistema de micrófono direccional fijo suprime las fuentes de ruido en segundo plano y concentra la atención del audífono en los sonidos en primer plano.
- La reducción de ruido analiza la entrada de sonido y reduce automáticamente las señales de ruido.
- Mediante el registro de datos se registra de manera precisa tanto el uso del aparato, como el uso del programa de ajuste manual del usuario.
- La función Easy-t permite cambiar automáticamente al programa específico de teléfono.
- El indicador de volumen ideal notifica mediante una señal sonora cuando el control del volumen ha alcanzado el valor de ganancia preferido.
- Regulador de control del volumen digital de fácil uso que requiere poca destreza manual.
- Aviso de batería baja
- Inicio retardado
- Encendido/apagado al abrir o cerrar la puerta del compartimiento de la batería.
- Programación posible mediante software de ajuste: U:fit™ (versión compatible con NOAH) o U:fit versión independiente ("Standalone"), 1.4 o superior.
- Opciones de estrategias de procesamiento, WDRC (del inglés "Wide Dynamic Range Compression" o compresión dinámica de rango extenso), limitación lineal.
- Tamaño de la batería: 13

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Control del volumen con seguro
- Puerta del compartimiento de la batería con seguro
- Gancho para la oreja con filtrado
- Tubo delgado acoplable que permite ajustes abiertos instantáneos (solamente en el modelo 125/60)
- Opciones de color de la prótesis ("concha") del audífono
- Unidad de entrada de audio directa

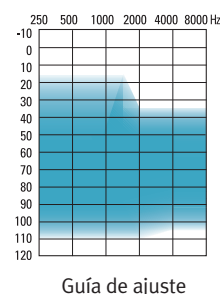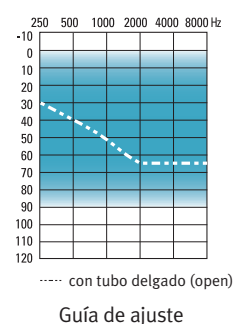

Next E es un modelo apropiado para personas con pérdida auditiva desde grado leve hasta severo y se puede ajustar a configuraciones de audiograma que van de pérdida inversa a pronunciada.

Next Essential Serie BTE

ANSI S3.22-1996 / IEC 118-7 2CC ACOPLADOR - DATOS TÉCNICOS		Next Essential HP (alta potencia)	Next Essential	Next Essential con tubo delgado (opcional)	IEC 118-0 OES ACOPLADOR - DATOS TÉCNICOS		Next Essential HP (alta potencia)
Frecuencia de prueba de referencia o RTF (kHz)			HFA	HFA	Frecuencia de prueba de referencia o RTF (kHz)		
ANSI CEI 118-7		2.5 kHz	1.6 kHz	1.6 kHz	ANSI CEI 118-0		2.5 kHz
OSPL90					OSPL90		
Valor máximo HFA a la frecuencia RTF		124 dB 108 dB 109 dB	125 dB 122 dB 121 dB	135 dB 128 dB 125 dB	Valor máximo a la frecuencia RTF		128 dB 118 dB 140 dB 133 dB
Ganancia máxima (entrada de 50 dB)					Ganancia máxima (entrada de 50 dB)		
Valor máximo HFA a la frecuencia RTF		53 dB 37 dB 37 dB	60 dB 52 dB 51 dB	75 dB 65 dB 61 dB	Valor máximo a la frecuencia RTF		58 dB 46 dB 63 dB 59 dB 79 dB 70 dB
Respuesta de frecuencia básica					Respuesta de frecuencia básica		
Rango de frecuencia (Hz)		100-6300	100-5900	100-5600	Rango de frecuencia (DIN) Hz		100-5700
Ganancia de prueba de referencia (RTG) (ANSI 1996)		30 dB	45 dB	51 dB	Ganancia de prueba de referencia (RTG)		39 dB
Sensibilidad de la bobina de inducción					Sensibilidad de la bobina de inducción		
(ANSI 1996, 31.6 mA/m)					Gráfico para 31.6 mA/m a la ganancia RTG		
HFA SPLITS (nivel de presión acústica en simulador inductivo de teléfono de media de alta frecuencia)		89 dB	104 dB	111 dB	a la frecuencia RTF		99 dB
STS		-1 dB	-1 dB	0 dB	Valor máximo a la frecuencia RTF		86 dB 77 dB
Drenaje de corriente a la ganancia RTG		1,1 mA	1,2 mA	2,2 mA	Drenaje de corriente a la ganancia RTG		1,1 mA
Duración normal de la batería		265 h	245 h	132 h	Duración normal de la batería		265 h
Ruido equivalente de entrada a la ganancia RTG		28 dB	20 dB	20 dB	Ruido equivalente de entrada a la ganancia RTG		28 dB
Distorsión armónica total					Distorsión armónica total		
a 500 Hz		1%	4%	2%	a 500 Hz		2%
a 800 Hz		1%	2%	2%	a 800 Hz		2%
a 1600 Hz		1%	1%	1%	a 1600 Hz		1%
Inmunidad CEM según ANSI C63-19-2001 EMC, Modo omni/telebobina					Inmunidad CEM según IEC 118-13, Intensidad de campo 75/50 V/m, modo omni		
M4/T4		M4/T4	M4/T4	M3/T4	IRIL Banda baja/alta dB SPL		39/48
							40/51

Condiciones de la prueba:

Gancho para la oreja: Sin filtrado

Tamaño de batería: 13

Fuente: Voltaje 1,3 V

Tubo: Longitud 25 mm Diámetro interior 1,93 mm

Datos de medición obtenidos con el audífono configurado en modo lineal y omni, con todas las funciones adaptables desactivadas

Nota para los profesionales de salud auditiva: no se deben ajustar obstrutores a pacientes con perforaciones en el tímpano, cavidades expuestas del oído medio o canales auditivos alterados mediante cirugía. El nivel de presión acústica (SPL) de los audífonos es superior a 132 dB SPL. En estos casos se recomienda el uso de un molde auricular adaptado al paciente. Unítron se reserva el derecho a modificar los datos de las especificaciones sin previo aviso, en caso de que se realicen mejora

